

Bruksanvisning

I Alpha

miniRITE T
miniRITE T R



Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

Works with

android 

bernafon 
Your hearing • Our passion

Modelloversikt

Dette heftet gjelder for Bernafon Alpha™-serien i de følgende høreapparatmodellene:

- ☐ MNR T R
- ☐ MNR T

FW 1.1

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Bernafon Alpha 9 MNR T R | 05714464033119 |
| ☐ Bernafon Alpha 7 MNR T R | 05714464033126 |
| ☐ Bernafon Alpha 5 MNR T R | 05714464033133 |
| | |
| ☐ Bernafon Alpha 9 MNR T | 05714464033119 |
| ☐ Bernafon Alpha 7 MNR T | 05714464033126 |
| ☐ Bernafon Alpha 5 MNR T | 05714464033133 |

Følgende lydgivere er tilgjengelige for de nevnte modellene:

- ☐ Lydgiver 60
- ☐ Lydgiver 85
- ☐ Lydgiver 100 (Power-apparat)
- ☐ Power Flex-propp lydgiver 100 (Power-apparat)
- ☐ Power Flex-propp lydgiver 105 (Power-apparat)
- ☐ MicroShell 60
- ☐ MicroShell 85

Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk	Høreapparatet skal forsterke og overføre lyd til øret.
Indikasjoner for bruk	Bilateral eller unilateral hørselsnedsettelse av typen sensorinevralt, mekanisk eller kombinert, i størrelsesordenen fra lett (16 dB HL*) til svært alvorlig (95 dB HL*), med en individuell frekvenskonfigurasjon.
Tiltenkt bruker	Person med hørselstap som bruker høreapparat og deres omsorgspersoner. Audiografen er ansvarlig for å justere høreapparatet.
Tiltenkt brukergruppe	Voksne og barn eldre enn 36 måneder.
Bruksmiljø	Innendørs og utendørs.

Kontraindikasjoner	Ikke egnet for spedbarn under 36 måneder. Brukere av aktive implantater må være spesielt oppmerksomme når de bruker høreapparatet. Ønsker du mer informasjon, les delen Advarsler .
Kliniske fordeler	Høreapparatet er designet for å gi bedre taleforståelse for å lette kommunikasjonen med sikte på å forbedre livskvaliteten.

**Som spesifisert av American Speech-Language-Hearing Association, [asha.org](https://www.asha.org), ved å bruke rentone-gjennomsnitt av 0,5, 1 og 2 kHz.*

VIKTIG MERKNAD

Forsterkningen i høreapparatet er spesielt justert og optimalisert for hørselen din gjennom tilpasningsprosessen som utføres av din audiograf.

Innholdsfortegnelse

Om

Lydgiver og ørepropp til ditt høreapparat	9
---	---

Å komme i gang

Ladetid	12
Batteriytelse	13
Slå høreapparatene AV/PÅ ved å bruke laderen	14
Slå høreapparatene AV/PÅ ved å bruke trykknappen	15
Slå høreapparatene AV/PÅ	16
Advarsel ved lavt batteri	17
Identifisere venstre og høyre høreapparat	18
Hvordan bytte engangsbatteri – størrelse 312	20
Sett på høreapparatet	22

Daglig bruk

Rensing	24
Bytte standard ørepropper	26
ProWax miniFit filter	28
Rengjøre tilpassede ørepropper	30
Bytte ProWax-filter	31
Oppbevaring av høreapparatet	32
Endre volum	33
Bytte program	34

Alternativer

Flymodus	36
Mute høreapparatene dine	38
Å bruke høreapparatet ditt med iPhone, iPad og iPod	40
Å bruke høreapparatet ditt med Android-enheter	41
Paring og kompatibilitet	42
Trådløst tilbehør og andre alternativer	43

Fortsetter på neste side

Innholdsfortegnelse

Tinnitus

Tinnitus SoundSupport™ (valgfritt)	46
Lydalternativer og justering av volum	48
Begrensing på brukstid	50
Tinnitus SoundSupport-advarsler	53


Advarsler

Generelle advarsler	54
---------------------	----

Mer info


Feilsøking	62
Vann- og støvavvisende (IP68)	66
Bruksforhold	67
Teknisk informasjon	70
Garanti	77
Dine individuelle høreapparatinnstillinger	78
Lyd- og LED-indikatorer	81

Lydgiver og ørepropp til ditt høreapparat

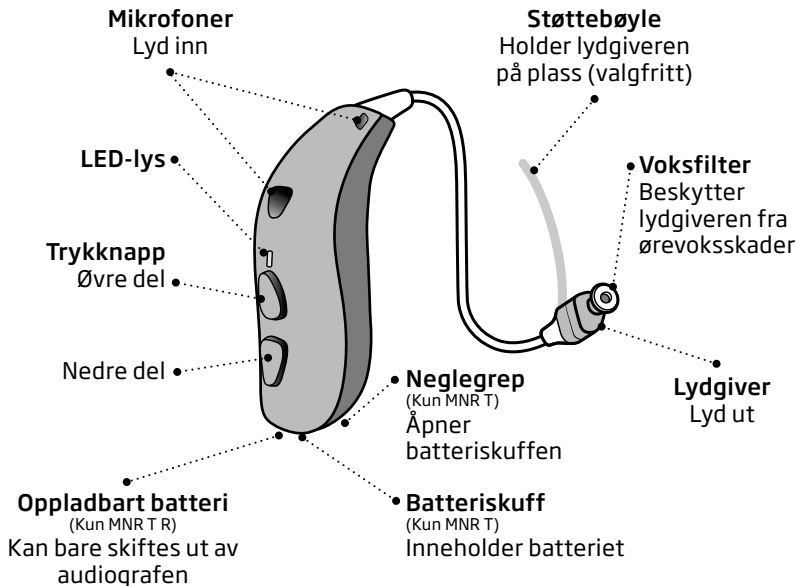


Høreapparatet bruker en av de følgende lydgiverne:


Standard lydgivere

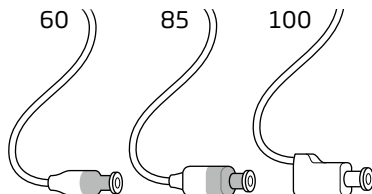

Lydgivere med Power flex-propp

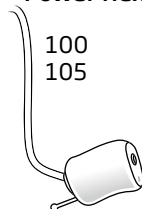

MicroShell

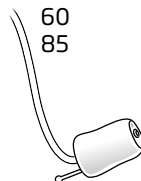

Lydgiverne bruker en av de følgende øreproppene:

Standard ørepropper



☐ Åpen bassdome



☐ Bassdome, dobbel ventilering



☐ Power-dome



☐ Grip Tip

Tilgjengelig i liten og stor størrelse, venstre og høyre, med og uten ventilasjon.

Spesiallagde ørepropper



☐ LiteTip



☐ Mikropropp



☐ VarioTherm® LiteTip



☐ VarioTherm® Mikropropp

VarioTherm® er et registrert varemerke for Dreve.

Domestørrelser



5 mm*



6 mm



8 mm



10 mm



12 mm

*Bare som Åpen bassdome for høyttaler 60

Merk

For detaljer om å bytte dome, se **delen Bytte standard ørepropper**.

Ladetid

(MNR T R)

Forsikre deg om at du lader høreapparatene fullt opp før du bruker de første gang, og at du deretter lader de hver natt. Det sikrer at du starter dagen med fulladede høreapparater.

Hvis batteriet til høreapparatet er fullstendig tomt for strøm er normal ladetid:

3 timer	1 time	0,5 time
Fulladet	50 % ladet	25 % ladet

Ladeprosessen stopper automatisk når batteriet er fulladet.

Ladetiden kan variere avhengig av batteriets gjenværende kapasitet og mellom venstre/høyre høreapparat.

For instruksjoner om hvordan du bruker laderen din, se laderens bruksanvisning.

Batteriytelse

I både MNR T R og MNR T varierer den daglige batteriytelsen avhengig av din individuelle bruk og høreapparatinnstillingene.

Å strøkke lyd fra en TV, mobiltelefon eller tilkoblingsenheter kan påvirke denne ytelsen.

Oppladbart batteri – MNR T R

Hvis det oppladbare høreapparatet ikke klarer en hel dag, kan det hende du må bytte ut det oppladbare batteriet. Kontakt i så fall din audiograf.

Hvis høreapparatene går tomme for batteri må du lade dem ved å plassere dem i laderen.

Vær oppmerksom på at omstart av høreapparatene ikke gir deg mer brukstid.

Slå høreapparatene AV/PÅ ved å bruke laderen

(MNR T R)

Høreapparatene slås automatisk PÅ når du tar dem ut av laderen.

Høreapparatets LED-lys lyser **GRØNT** etter omtrent to sekunder. Vent til høreapparatets LED-lys blinker **GRØNT** to ganger, som bekrefter at det er klart til bruk. Avhengig av innstillingene for høreapparatet ditt, kan det hende at du også hører en oppstartsmelodi.

Høreapparatet slås automatisk AV og begynner å lades opp når det settes i laderen. Høreapparatets LED-lys lyser **ORANSJE**.


VIKTIG MERKNAD

Hvis det er aktuelt, må du forsikre deg om at laderen er koblet til en strømkilde eller at laderen har det innebygde batteriet ladet når høreapparatet sitter i ladeporten. For mer informasjon se laderens bruksanvisning.

Slå høreapparatene AV/PÅ ved å bruke trykknappen

(MNR T R)

Høreapparatene kan slås AV/PÅ ved å bruke trykknappen.

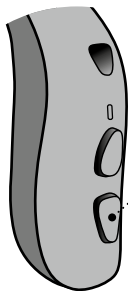

Slå PÅ

Trykk og hold nede den nedre delen av trykknappen i omtrent tre sekunder til høreapparatets LED-lys lyser **GRØNT**. Slipp trykknappen og vent til LED-lyset til høreapparatet blinker **GRØNT** to ganger. Høreapparatet er nå slått PÅ.

Slå AV

Trykk og hold nede den nedre delen av trykknappen i omtrent tre sekunder til høreapparatets LED-lys lyser **ORANSJE**. Høreapparatet spiller fire synkende toner. Slipp trykknappen og vent til høreapparatet slås AV.

For informasjon om toner, se **delen Lyd- og LED-lysindikatorer**.

Slå høreapparatene AV/PÅ


(MNR T)

Batteriskuffen brukes til å slå høreapparatet AV og PÅ.

For å spare på batteriet bør du sørge for å skru AV høreapparatene når du ikke bruker dem. Åpne og lukk batteriskuffen for å utføre en rask tilbakestilling av innstillingene til høreapparatet.


Slå PÅ

Lukk batteriskuffen med batteriet på plass.

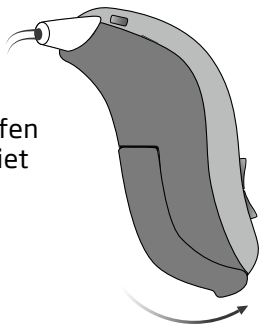

Slå AV

Åpne batteriskuffen.

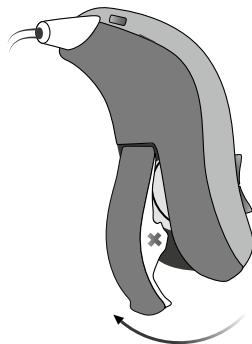

Advarsel ved lavt batteri

Rett før batteriet går helt tomt hører du fire synkende toner. For å utvide batteriets ytelse, sørg for at du stopper evt. streaming av lyd.

□ MNR T R: Ved lavt batterinivå, hører du tre vekslende pipetoner. Dette gir deg omtrent to timer før høreapparatet går tomt for batteri. På dette tidspunktet kan du fortsette å streame lyd i omtrent én time.

□ MNR T: Ved lavt batterinivå, hører du tre vekslende pipetoner. Dette gir deg omtrent 15 minutter før høreapparatet går tomt for batteri. På dette tidspunktet blir Bluetooth®-tilkobling slått AV.

 Tre vekslende pip
= Batterinivå lavt.

 Fire synkende toner
= Batteriet er tomt.

LED-lys

Kontinuerlig **ORANSJE** blink indikerer lavt batteri.


Identifisere venstre og høyre høreapparat

(MNR T R)

Det er viktig å skille mellom venstre og høyre apparat, da de kan være programmert forskjellig.

Du finner venstre/høyre fargeindikatorer på selve høreapparatet og på 60 og 85 høyttalere som vist. Indikatormarkeringer (enten V eller H) kan også finnes på 100 høyttalere og noen ørepropper.

For 105 høyttalere finner du indikatoren på øreproppen.

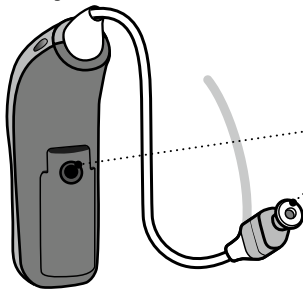

En **RØD** indikator markerer det **HØYRE** høreapparatet.

En **BLÅ** indikator markerer det **VENSTRE** høreapparatet.


Identifisere venstre og høyre høreapparat

(MNR T)

Det er viktig å skille mellom venstre og høyre apparat, da de kan være programmert forskjellig.

Du finner venstre/høyre fargeindikatorer på selve høreapparatet og på 60 og 85 høyttalere som vist. Indikatormarkeringer (enten V eller H) kan også finnes på 100 høyttalere og noen ørepropper.


For 105 høyttalere finner du indikatoren på øreproppen.

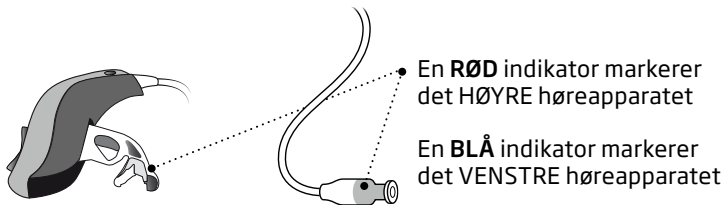

Hvordan bytte engangsbatteri – størrelse 312


(MNR T)

1. Fjern

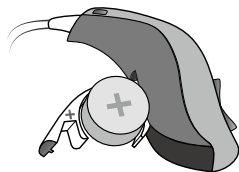


Åpne batteriskuffen helt og ta ut batteriet.

2. Ta av

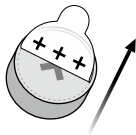


Fjern den påklippede lappen.

3. Sett inn

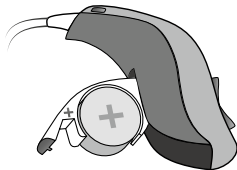


Sett inn det nye batteriet i batteriskuffen med pluss-siden vendt oppover.

4. Lukke

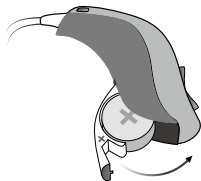

Lukk batteriskuffen.

Tips

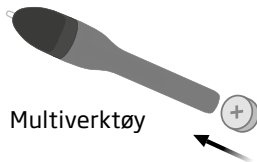

Du kan bruke multiverktøyet til å bytte batteri. Bruk den magnetiske enden for å fjerne og sette inn batterier.

MultiTool får du av din audiograf.

Sett på høreapparatet

Trinn 1




Plasser høreapparatet bak øret.

Du bør alltid bruke lyd giveren med en ørepropp festet på den.

Sørg for at du bare bruker deler som er laget for ditt høreapparat.


Trinn 2

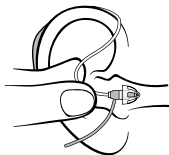

Hold bøylen på lyd giveren mellom tommel og pekefinger.

Øreproppen skal peke mot åpningen til øregangen.

Trinn 3

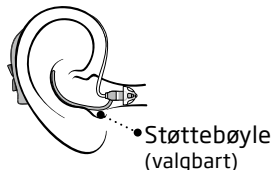


Skyv forsiktig øreproppen inn i øregangen til lyd giverledningen ligger tett inntil hodet ditt.

Dersom lyd giveren har en støttebøyle skal denne bøyes til slik at den ligger godt plassert i øret ditt.

Rensing

Multiverktøyet inneholder en børste og løkke for rengjøring og fjerning av ørevoks. Ta kontakt med din audiograf dersom du har behov for et nytt multiverktøy.

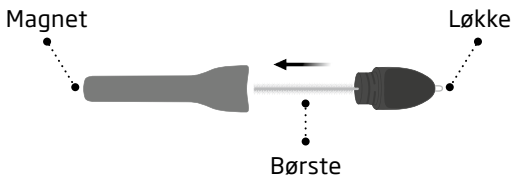

VIKTIG MERKNAD


Multiverktøyet har en innebygd magnet. Hold multiverktøyet minst 30 centimeter unna kredittkort eller annet magnetisk følsomt utstyr.

Ikke mist høreapparatet når du håndterer det. Se til at du holder det over en myk overflate for å unngå at det blir skadet mens du rengjør det.

Rengjøring av mikrofonåpninger

Bruk multiverktøybørsten til å børste rusk forsiktig vekk fra åpningene og overflaten rundt åpningene.

Forsikre deg om at du ikke bruker kraft for å presse deler av multiverktøyet inn i mikrofonåpningene. Dette kan skade høreapparatet.

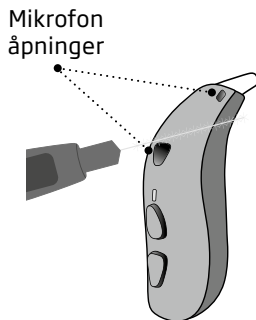


VIKTIG MERKNAD

Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre høreapparatet. Høreapparatet må aldri vaskes eller senkes ned i vann eller andre væsker.

Bytte standard ørepropper


Det er viktig at du ikke rengjør standard ørepropper (dome og Grip Tip). Hvis proppen fylles med ørevoks, bytter du den med en ny. Grip Tip bør erstattes minst én gang i måneden.

Trinn 1

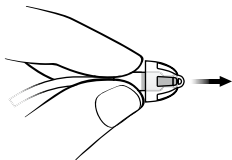


Hold på lydgiveren og dra av øreproppen.

Trinn 2

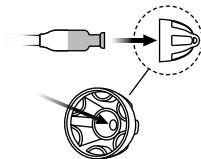

Fest lydgiveren nøyaktig i midten av øreproppen for å oppnå et godt feste.

Trinn 3

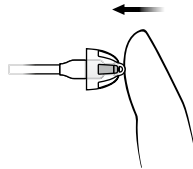

Trykk godt for å påse at ørepluggen er godt festet.


VIKTIG MERKNAD

Hvis øreproppen ikke er på lydgiveren når den fjernes fra øret, kan den fortsatt være i øregangen. Kontakt din audiograf for ytterligere instruksjoner.

ProWax miniFit filter

Lydgiveren har et hvitt voksfilter festet til enden der øreproppen er festet. Voksfilteret hindrer voks og skitt fra å skade lydgiveren.

Sørg for at du bytter filteret når det er tett, eller hvis høreapparatet ikke høres normalt ut. Alternativt kan du kontakte din audiograf. Forsikre deg om at du fjerner øreproppen fra lydgiveren før du bytter voksfilter. For å gjøre dette, se **delen Bytte standard ørepropper**.

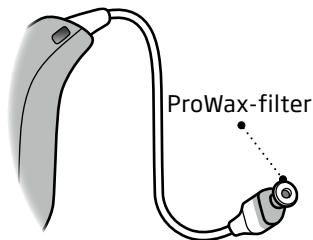


VIKTIG MERKNAD

Sørg for at du alltid bruker samme type voksfilter som det som opprinnelig ble levert sammen med høreapparatet. Dersom du er usikker på bytte av voksfilteret må du ta kontakt med audiografen din.


Erstatt ProWax miniFit-filter

1. Verktøy

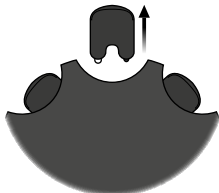


Ta verktøyet ut fra beholderen. Verktøyet har to ender, én tom til fjerning, og én med et nytt voksfilter.

2. Fjern

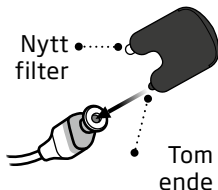

Sett inn den tomme enden i voksfilteret i lydgiveren og trekk det ut.

3. Sett inn

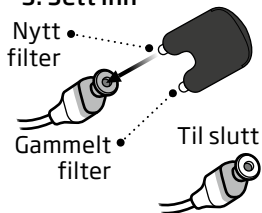

Sett inn det nye voksfilteret ved å bruke den andre enden. Fjern verktøyet og kast det.

Merk

Hvis du bruker en propp eller LiteTip, må audiografen bytte ut voksfilteret i lydgiveren.

Rengjøre tilpassede ørepropper


Forsikre deg om at du rengjør øreproppen regelmessig.

Øreproppen har et hvitt voksfilter* som hindrer ørevoks og smuss i å skade høreapparatet.

Sørg for at du bytter filteret når det er tett, eller hvis høreapparatet ikke høres normalt ut.

Alternativt kan du kontakte din audiograf.

- Rengjør ventilasjonsåpningene ved å føre kosten gjennom hullet mens du dreier den litt.

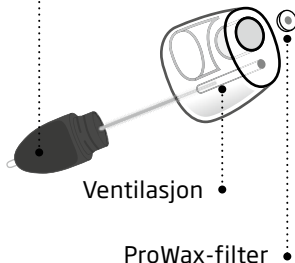


Merk

Hvis du bruker en propp eller LiteTip, må audiografen bytte ut voksfilteret i lyd giveren.

* VarioTherm-micromould og LiteTip har ikke voksfilter


Bytte ProWax-filter

1. Verktøy

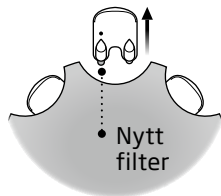


Ta verktøyet ut fra beholderen. Verktøyet har to ender, én tom til fjerning, og én med et nytt voksfilter.

2. Fjern

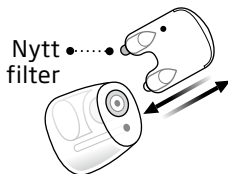

Før den tomme enden inn i voksfilteret i øreproppen og trekk det ut.

3. Sett inn

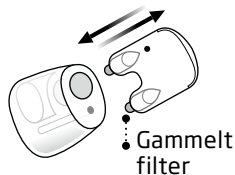

Sett inn det nye voksfilteret ved å bruke den andre enden. Fjern verktøyet og kast det.

Oppbevaring av høreapparatet

(MNR T R)

Når du ikke bruker høreapparatet er laderen det beste stedet å oppbevare det.

Ikke utsett det for høy varme for å sikre lengst mulig levetid for det oppladbare batteriet i høreapparatet. For eksempel må du ikke la høreapparatet ligge i solen foran et vindu eller i en bil, selv om høreapparatet er i laderen.

Langtidslagring

Før du legger bort eller oppbevarer høreapparatet i over en lengre periode (mer enn 14 dager), må du forsikre deg om at du først lader høreapparatet helt opp og deretter slår det av. På denne måten kan batteriet lades på nytt.


Merk

For å beskytte det oppladbare batteriet må du lade høreapparatet fullstendig hver sjette måned. Hvis et lagret høreapparat ikke lades innen en seks måneders periode, må det oppladbare batteriet byttes.

Endre volum

Trykknappen lar deg justere volumet. Du hører et klikk når du øker eller reduserer volumet.

For mer informasjon, se tabellen **Oversikt over de generelle høreapparat-innstillingene**, i delen **Dine individuelle høreapparatinnstillinger** i slutten av dette heftet.

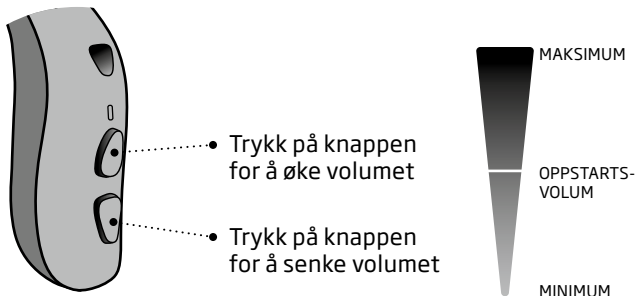


Bytte program

Høreapparatet ditt kan inneholde opptil fire forskjellige programmer konfigurert av din audiograf. Avhengig av hvilket program du velger (1, 2, 3 eller 4), hører du én til fire toner.

For informasjon om toner, se delen **Lyd- og LED-lysindikatorer**.

For mer informasjon, se tabellen **Oversikt over de generelle høreapparat-innstillingene**, i delen **Dine individuelle høreapparatinnstillinger** i slutten av dette heftet.

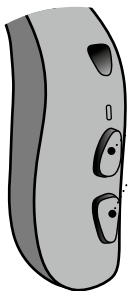

- Trykk på trykknappen for å bytte mellom programmer.


Programsyklusen bytter ett program frem når man trykker på den øverste trykknappen, for eksempel program 1 til 2 eller program 4 til 1.

Hvis man trykker på den nederste trykknappen går programsyklusen bakover, for eksempel 2 til 1 eller program 1 til 4.

Flymodus

Bluetooth® er slått AV når flymodus er aktivert. Men høreapparatet er fremdeles slått PÅ og fungerer. Merk at flymodus aktiveres på begge høreapparatene ved å trykke på trykknappen på ett høreapparat. For mer informasjon om lyder og lys, se delen **Lyd- og LED-lysindikatorer**.

MNR T R

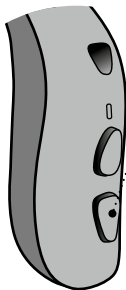

- **For å aktivere og deaktivere**


Trykk og hold nede den nedre delen av trykknappen i syv sekunder.

Fire synkende toner, en kort melodi og et LED-lysmønster bekrefter handlingen din.

For å aktivere og deaktivere

Trykk og hold nede én av trykknappene i minst syv sekunder. En melodi og et LED-lysmønster bekrefter handlingen din.

Åpning og lukking av batteriskuffen vil også deaktivere flymodus.

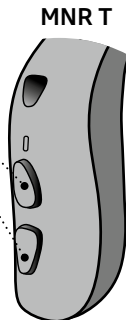

Mute høreapparatene dine

I både MNR T og MNR T R kan du mute høreapparatene dine ved å bruke en av følgende valgfrie enheter/app:

- EasyControl-A App
- SoundClip-A
- RC-A

Slik fjerner du mute på høreapparatene dine

Du kan fjerne mute på høreapparatene dine ved å bruke en av de valgfrie enhetene/appene eller ved å utføre et kort trykk på øvre eller nedre del av trykknappen på høreapparatene.

Kun MNR T

Du kan også mute høreapparatene ved å trykke på én av trykknappene i fire sekunder.

VIKTIG MERKNAD

Ikke bruk mutefunksjonen som en AV-knapp, da høreapparatet fremdeles bruker batteri i denne modusen.

Å bruke høreapparatet ditt med iPhone, iPad og iPod

Bernafon Alpha er et Made for iPhone® høreapparat og tillater direkte kommunikasjon og kontroll med iPhone, iPad® eller iPod touch®.*

For hjelp med bruk av høreapparatet sammen med disse produktene, ta kontakt med din audiograf.

Merket «Made for iPhone» betyr at det elektroniske tilbehøret har blitt laget for å kobles spesifikt til Apples produkter som fremgår av merket, og har blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apple sine standarder for ytelse. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller dens overholdelse av regulatoriske standarder og standarder for sikkerhet. Merk deg at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke trådløs ytelse.

*For en liste over kompatible iPhone, iPad, iPod touch og Android™-enheter, se følgende nettsted: www.bernafon.com/products/accessories

Å bruke høreapparatet ditt med Android-enheter

Bernafon Alpha støtter lydstreaming for høreapparater (ASHA) og kan brukes til direkte kommunikasjon og kontroll med utvalgte Android™-enheter.*

For hjelp med bruk av høreapparatet sammen med Android-enheter, ta kontakt med din audiograf.

Paring og kompatibilitet

For instruksjoner om hvordan du parer høreapparatet ditt med iPhone, iPad, iPod touch eller Android-enheter, se følgende nettsted:

www.bernafon.com/hearing-aid-users/support/library/

For en liste over kompatible iPhone, iPad, iPod touch og Android™-enheter, se følgende nettsted:

www.bernafon.com/products/accessories

Trådløst tilbehør og andre alternativer

En mengde trådløst tilbehør kan tilkobles høreapparatene dine. Disse kan gjøre det mulig for deg å høre og kommunisere bedre i mange hverdagslige situasjoner.

SoundClip-A

En enhet som kan brukes som ekstern mikrofon og handsfree hodetelefoner når den er koblet til mobiltelefonen din.

RC-A

En enhet som gir deg muligheten til å endre program, justere volum eller dempe høreapparatene.

TV-A

En enhet som streamer lyd fra en TV eller elektronisk lydenhet til høreapparatene dine.

EduMic

En enhet som kan brukes som en ekstern mikrofon i klasserom, arbeidsmiljøer, offentlige steder (ved bruk av telespole) og andre innstillinger.

EasyControl-A App

Et program som lar deg kontrollere høreapparatet fra mobiltelefonen eller nettbrettet. For iPhone, iPad, iPod touch og Android-enheter. Forsikre deg om at du bare laster ned og installerer EasyControl-A App fra de offisielle appbutikkene.

Telespole

Telespole kan hjelpe deg med å høre bedre når du har en telefon med innebygd slynge eller når du er i bygninger med teleslyngesystemer, slik som teatre, steder for tilbedelse eller undervisningsrom. Dette symbolet vises der en teleslynge er installert.



Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke fra Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker fra Google LLC.

Tinnitus SoundSupport™ (valgfritt)

Tiltenkt bruk av Tinnitus SoundSupport

Som en del av behandlingsprogram for tinnitus, er Tinnitus SoundSupport et verktøy som er tiltenkt å generere lyder for å gi midlertidig avlastning for pasienter som lider av tinnitus.

Målgruppen er den voksne befolkningen over 18 år.

Tinnitus SoundSupport er beregnet for autoriserte audiografer eller annet autorisert helsepersonell som er kjent med vurdering og behandling av tinnitus og hørselstap. Tilpassing av Tinnitus SoundSupport må utføres av en audiograf som deltar i et program for håndtering av tinnitus.

Retningslinjer for brukere av tinnitus lydgenerator

De følgende instruksene inneholder informasjon om Tinnitus SoundSupport, som audiografen kan ha aktivert i høreapparatet ditt.

Tinnitus SoundSupport er et hjelpemiddel for håndtering av tinnitus. Dens oppgave er å skape lyd med tilstrekkelig intensitet og båndbredde som hjelper pasienter med å håndtere tinnitus.

Audiografen din kan også tilby oppfølging. Det er viktig å følge hans/hennes råd og retningslinjer for slik oppfølging.

Kun foreskreven bruk

God helserutine krever at personen som rapporterer om tinnitus får en medisinsk evaluering av en autorisert ørelege før bruk av lydgenerator. Formålet med slike evalueringer er å påse at alle tilstander hvor man kan få medisinsk behandling som kan forårsake tinnitus, identifiseres og behandles før bruk av en lydgenerator.

Lydalternativer og justering av volum

Tinnitus SoundSupport programmeres av audiografen din slik at det tilpasses hørselstapet ditt, og preferanser for lindring av tinnitus. Det gir en rekke ulike lydalternativer. Sammen med audiografen din kan du velge din(e) foretrukne lyd(er).

Tinnitus SoundSupport-programmer

Du bestemmer sammen med audiografen din i hvilke programmer du vil ha Tinnitus SoundSupport aktivert. Lydgeneratoren kan aktiveres i opptil fire ulike programmer.

Mute

Hvis du er i et program der Tinnitus SoundSupport er aktivert, vil mute-funksjonaliteten kun dempe lyder fra omgivelsene og ikke lyden fra Tinnitus SoundSupport. For informasjon om hvordan du muter høreapparatene dine, se delen **Å mute høreapparatene dine**.

Justering av volum med Tinnitus SoundSupport

Når du velger et høreapparatprogram der Tinnitus SoundSupport er aktivert, vil audiografen din angi trykknappen på høreapparatet som en volumkontroll kun for lyden som lages av Tinnitus SoundSupport.

Audiografen angir volumkontroll for lydgeneratoren på én av to måter:

- A) Endre volum i begge ørene hver for seg, eller
- B) Endre volum i begge ørene samtidig.

For mer informasjon om volumjusteringer med Tinnitus SoundSupport, se tabellen **Oversikt over innstillinger for Tinnitus SoundSupport for høreapparatet ditt** i delen **Dine individuelle høreapparatinnstillinger** i slutten av dette heftet.

Begrensing på brukstid

Daglig bruk

Volumnivåene til Tinnitus SoundSupport kan angis til et nivå som kan føre til permanent hørselsskade hvis det brukes over en lengre periode. Audiografen din informerer deg om den maksimale mengden tid per dag du bør bruke Tinnitus SoundSupport. Det bør aldri brukes på ukomfortable nivåer.

Se tabellen **Tinnitus SoundSupport: Begrensninger ved bruk i delen Dine individuelle høreapparatinnstillinger** på slutten av dette heftet for å lære hvordan du sikkert mange timer om dagen kan bruke lindringslyden i høreapparatene.

Viktig informasjon for audiografer om Tinnitus SoundSupport

Enhetsbeskrivelse

Tinnitus SoundSupport er en modulfunksjon som audiografen kan aktivere i høreapparatene.

Maksimal brukstid

Brukstiden til Tinnitus SoundSupport reduseres når du øker nivået over 80 dB(A) SPL. Tilpasningsprogrammet viser automatisk en advarsel når høreapparatet overskrider 80 dB(A) SPL. For mer informasjon Se **Indikator for maksimal brukstid** ved siden av tilpasningsdiagrammet for tinnitus i tilpasningsprogrammet.

Volumkontrollen er deaktivert

Som standard er volumkontrollen for lydgeneratoren deaktivert i høreapparatet. Fare for støyeksponering øker når volumkontrollen er aktivert.

Hvis volumkontrollen er aktivert

En advarsel kan vises hvis du aktiverer tinnitus volumkontroll i skjermbildet **Knapper og indikatorer**. Dette skjer hvis lindringslyden kan lyttes på ved nivåer som kan forårsake hørselsskade.

Tabellen med **maks brukstid** i tilpasningsprogramvaren viser antall timer pasienten trygt kan bruke Tinnitus SoundSupport.

1. Vær oppmerksom på og merk maksimal brukstid for hvert program hvor Tinnitus SoundSupport er aktivert.
2. Sørg for at du skriver disse verdiene på **Tinnitus SoundSupport: Begrensninger for bruk** som finnes på baksiden av dette heftet.
3. Instruer pasienten din tilsvarende.

Tinnitus SoundSupport-advarsler

Hvis audiografen din har aktivert lydgeneratoren Tinnitus SoundSupport, bør du være oppmerksom på følgende advarsler.

Det er noen potensielle problemer forbundet med bruk av lyd generert av en tinnitusenhet. Blant dem er potensiale for forverring av tinnitus og/eller en potensiell endring av høreterskler.

Dersom du skulle oppleve eller merke en endring i hørsel eller tinnitus, eller svimmelhet, kvalme, hodepine, hjertebank eller mulig hudirritasjon etter kontakt med enheten, bør du umiddelbart slutte å bruke enheten og oppsøke en ørelege, audiograf eller annen ørespesialist.

Som med andre enheter, kan misbruk av lydgeneratoren føre til potensielt skadelige virkninger. Forsiktighet bør utvises for å forebygge uautorisert bruk, og for å holde enheten utenfor barn og kjæledyrs rekkevidde.

Maksimal brukstid

Følg alltid maksimal brukstid per dag av Tinnitus SoundSupport som anbefalt av audiografen din. Forlenget bruk kan være til forverring av din tinnitus eller av ditt hørselstap.

Generelle advarsler

For din personlige sikkerhet og for å sikre korrekt bruk bør du gjøre deg fullstendig kjent med følgende generelle advarsler før du bruker høreapparatet.

Kontakt audiografen hvis du opplever uventede eller alvorlige hendelser med høreapparatet ditt under bruk eller på grunn av bruken. Audiografen din vil støtte deg med problemhåndtering og, hvis relevant, rapportering til produsenten og/eller nasjonale myndigheter.

Merk at høreapparatene ikke gir tilbake normal hørsel, og det forhindrer eller forbedrer ikke hørselsproblemer som er forårsaket av organiske forhold. Høreapparatene er bare en del av hørehabilitering og kan trenge å bli supplert med auditiv trening og instruksjon i leppelesing. Merk også at i de fleste tilfeller, vil ujevn bruk av et høreapparat gjøre at brukeren ikke vil ha full nytte av det.

(MNR T R)

Dette høreapparatet drives av et innebygd, oppladbart litium-ion-batteri. Forsikre deg om at du lader høreapparatet og gjør deg kjent med sikkerhets- og håndteringsinformasjonen knyttet til oppladbare høreapparater.

Ikke prøv å få tilgang til batteriet som er satt inn i høreapparatet. Batteriet må kun skiftes ut av audiografen din.

Lad kun høreapparatet med en angitt lader. Andre ladere risikerer å ødelegge høreapparatet og batteriet.

Bruk av høreapparat

Høreapparater skal alltid brukes i henhold til bruksanvisningen og alltid justeres av din audiograf. Feilaktig bruk kan resultere i plutselig og permanent hørselstap.

La aldri andre bruke høreapparatene dine fordi feil bruk kan forårsake permanent hørselsskade for dem.

Fare for kvelning og risiko for å svelge batterier og andre smådeler.

Høreapparatet, dets deler og batterier er ikke leketøy og må holdes utenfor rekkevidde av barn, eller andre som kan kunne tenkes å svelge dette, eller på annen måte skade seg selv.

Hvis et batteri, et høreapparat eller en liten del svelges, må lege oppsøkes øyeblikkelig.

(MNR T)

Batterier har av og til blitt tatt for å være tabletter. Kontroller derfor medisinen din nøye før du svelger noen piller.

De fleste høreapparater kan leveres med barnesikret batteriskuff ved forespørsel. Dette anbefales på det sterkeste for babyer, små barn og mennesker med intellektuelle og utviklingsmessige funksjonshemninger.

Batteribruk

Bruk alltid batteri som er anbefalt av audiografen. Batterier med dårlig kvalitet kan lekke og forårsake skade på høreapparatet.

Prøv aldri å lade opp eller brenne batteriene. Det er risiko for at batteriene kan eksplodere.

Fortsetter på neste side

Generelle advarsler

Eksplosiver (MNR T R)

Høreapparatet er trygt å bruke under vanlige bruksforhold. Høreapparatet har ikke blitt testet for samsvar med internasjonale standarder når det gjelder eksplosive atmosfærer.

Bruk derfor ikke høreapparatet i miljøer med fare for eksplosjoner, f.eks. gruver, oksygenrike miljøer eller områder der brennbare bedøvelsesmidler håndteres.

Risiko for dødelighet og for å svelge litium-ion-batterier eller plassere dem i øret eller nesen (MNR T R)

Svelg aldri litium-ion-batterier og legg dem ikke i øret eller nesen, da dette kan føre til alvorlig personskade eller død på så lite som to timer. Dette kan skyldes kjemiske forbrenninger, som permanent kan skade nesen eller øret eller potensielt føre til perforering av de indre organene. Hvis et litium-ion-batteri svelges eller legges i øret eller nesen, må du øyeblikkelig oppsøke medisinsk behandling.

Oppladbart batteri

(MNR T R)

Ikke prøv å åpne høreapparatet, da det kan skade batteriet.

Prøv aldri å bytte ut batteriet. Hvis det er nødvendig å bytte ut batteriet må du ta med enheten til audiografen din. Servicegarantien er ugyldig hvis det er tegn på at den har blitt tuklet med.

Ikke bruk høreapparatet i tilfelle av batterilekkasje da det kan forårsake hudirritasjon på grunn av syrer som kommer fra batteriet som lekker. Hvis huden din har vært i kontakt med de lekkede batterisyrene, bruk en våt klut for å tørke av og sørg for at det ikke blir igjen noe syre på huden din. Rådfør deg med legen din hvis du opplever hudirritasjon. Kontakt din audiograf for ytterligere håndteringsinstruksjoner.

Sikkerheten ved gjenopplading av batterier ved bruk av USB-ledningen, avgjøres kun av den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til eksternt utstyr koblet inn i et strømuttak, må dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Feilfunksjon

Vær oppmerksom på muligheten for at høreapparatet ditt kan slutte å fungere uten forvarsel. Tenk på dette når du er avhengig av varsellyder (f.eks. når du er i trafikken). Høreapparatet kan slutte å virke, f.eks. hvis batteriet er flatt eller at fukt og ørevoks tetter igjen slangene.

Fortsetter på neste side

Generelle advarsler

Aktive implantater

Høreapparatet har blitt grundig testet og karakterisert for menneskers helse i henhold til internasjonale standarder for menneskelig eksponering (Specific Absorption Ratio – SAR), induisert elektromagnetisk effekt og spenninger i menneskers kropp.

Eksponeringsverdiene er godt under internasjonalt aksepterte sikkerhetsgrenser for SAR, induisert elektromagnetisk effekt og spenninger i menneskers kropp definert i standardene for menneskelig helse og sameksistens med aktive medisinske implantater, som pacemakere og hjertestartere.

Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, kontakt produsenten av den implanterbare enheten for å få informasjon om risikoen for forstyrrelser.

Autophone-magneten eller multiverktøyet (som har en innebygd magnet) bør være mer enn 30 centimeter unna implantatet, f.eks. ikke ha det i brystlommen din.

Følg retningslinjene som anbefales av produsentene til implanterbare defibrillatorer og pacemakere når det gjelder deres bruk sammen med magneter.

Cochlear-implantater

Hvis du bruker et cochlear-implantat (CI) på det ene øret og et høreapparat på det andre øret, må du alltid holde CI minst 1 centimeter (0,4 tommer) fra høreapparatet. Magnetfeltet fra CI-lydprosessorer, spoler og magneter kan skade høyttalerenheten i høreapparatet permanent. Plasser aldri enhetene tett sammen på et bord, f.eks. når du rengjør eller bytter batterier. Ikke bær CI og høreapparatet sammen i samme eske.

Løsnet ørepropp i øregangen

Hvis øreproppen ikke er på lydgiveren når den fjernes fra øret, kan den fortsatt være i øregangen. Kontakt din audiograf for ytterligere instruksjoner.

Røntgen/CT/MR/PET skanning, elektroterapi og operasjon

Ta av høreapparatet under f.eks. røntgen, CT / MR / PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi da høreapparatet kan ta skade om det eksponeres for elektromagnetiske felter.

Varme og kjemikalier

Høreapparatet må aldri utsettes for sterk varme f. eks etterlates inne i en bil som står parkert i solen.

Høreapparatet må aldri tørkes i mikrobølgeovn eller i andre ovner.

Kjemikaliene i sminke, hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, solkrem og insektsspray kan skade høreapparatet. Fjern alltid høreapparatet før du bruker slike produkter, og la slike produkter tørke før du bruker høreapparatet igjen.

Tilkobling til eksternt utstyr

Sikkerheten til høreapparatene ved tilkobling til eksternt utstyr med USB-kabel og/eller direkte avhenger av den eksterne signalkilden. Når høreapparatene er tilkoblet eksternt utstyr som er koblet til en stikkontakt, må dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Fortsetter på neste side

Generelle advarsler

Power høreapparat

Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater når maksimalt lydtrykk overstiger 132 dB SPL (IEC 60138-4/IEC 711), fordi det kan være en risiko for å skade resthørselen til brukeren av høreapparatene.

For informasjon om høreapparatet ditt er et power-apparat, se modelloversikten i dette heftet.

Mulige bivirkninger

Høreapparater, ørepropper og domer kan forårsake en økt dannelse av ørevoks.

De ikke-allergifremmende materialene som brukes i høreapparater kan i sjeldne tilfeller forårsake hudirritasjon eller andre bivirkninger.

Oppsøk lege hvis disse tilstandene oppstår.

Bruk i fly

Høreapparatene dine har Bluetooth trådløs teknologi. Ombord i fly må høreapparatenes flymodus være aktivert, med mindre bruk av Bluetooth tillates av flypersonalet.

Bruk av tredjeparts tilbehør

Bruk bare tilbehør eller kabler levert av produsenten. Ikke-originalt tilbehør kan føre til redusert elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) på høreapparatene dine.

Modifikasjon av høreapparater er ikke tillatt

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten vil annullere garantien for utstyret.

Interferens

Høreapparatene har blitt testet grundig for interferens i henhold til de strengeste, internasjonale standardene.

Elektromagnetisk forstyrrelse kan oppstå i nærheten av utstyr med symbolet til venstre. Bærbart og mobilt RF (radiofrekvens) kommunikasjonsutstyr kan påvirke ytelsen til høreapparatene. Hvis høreapparatene dine blir påvirket av elektromagnetisk forstyrrelse, flytt deg vekk fra kilden for å redusere forstyrrelsen.

Feilsøking

MNR T R/T

Symptom	Mulige årsaker
Ingen lyd	Høreapparatet er tomt for strøm
	Flatt batteri
	Tette ørepropper (dome, GripTip, eller ørepropp)
	Høreapparatets mikrofon er mutet
Periodevis eller redusert lyd	Tett lydutgang
	Fuktighet
Hyling/piping	Øreproppen til høreapparatet er satt inn feil
	Oppsamlet ørevoks i øregangen
Piping	Hvis høreapparatet spiller åtte pip, fire ganger etter hverandre trenger høreapparatet en servicesjekk av mikrofonen
Problemer under sammenkobling med smarttelefon	Bluetooth-tilkobling mislyktes
	Kun ett høreapparat er paret

Løsninger

Lade høreapparatet (**MNR T R**) / Bytte batteri (**MNR T**)

Kontakt din audiograf (**MNR T R**) / Bytte batteri (**MNR T**)

Rengjør øreproppen
Erstatt voksfilter, dome eller Grip Tip

Deaktiver mute

Rengjør eller erstatt voksfilter, dome eller Grip Tip

Tørk høreapparatet forsiktig og la det tørke

Sett inn øreproppen på nytt

Få øregangen undersøkt av legen din

Kontakt din audiograf

- 1) Fjern paringen fra høreapparatet ditt
- 2) På telefonen din, slå Bluetooth AV og PÅ igjen.
- 3) Slå høreapparatet AV og slå det så PÅ igjen
- 4) Par høreapparatet på nytt (For veiledning, besøk:
www.bernafon.com/hearing-aid-users/support/library/)

Merk

Hvis ingen av løsningene fungerer, konsulterer du din audiograf.

Fortsetter på neste side

Feilsøking

MNR T R – For å feilsøke laderen, se laderens bruksanvisning.

Symptom	Mulige årsaker
Høreapparatets LED-lys forblir AV når høreapparatet er plassert i laderen	Laderen er ikke slått PÅ
	Høreapparatets eller laderens temperatur er enten for varm eller for kald
	Lading er ikke fullført. Romtemperaturen overstiger +35 °C (+95 °F), som forlenger ladetiden. Laderen har avsluttet ladingen for å beskytte batteriet.
	Høreapparatet sitter ikke riktig i laderen
Høreapparatets LED-lys blinker GRØNT når høreapparatet er plassert i laderen	Høreapparatet har ikke vært i bruk på lengre tid
Høreapparatets LED-lys blinker ORANSJE når høreapparatet er plassert i laderen	Systemfeil

Løsninger

Kontroller at laderens strømadapter er riktig tilkoblet eller at powerbanken har nok batteri

Flytt laderen og høreapparatet til et sted med en temperatur mellom + 5° C og + 40 °C

Sett høreapparatet inn i laderen igjen. Dette fullfører ladingen innen omtrent 15 minutter.

Sjekk ladeportene for fremmedlegemer

Avhengig av hvor utladet batteriet i høreapparatet er gjenopptar høreapparatet automatisk normal lademodus etter en tidsramme på opptil ti minutter. Forsikre deg om at du lar høreapparatene ligge i laderen under denne prosessen.

Kontakt din audiograf

Merk

Hvis ingen av løsningene fungerer, konsulterer du din audiograf.

Vann- og støvavvisende (IP68)

Høreapparatet er støvtett og beskyttet mot vanninntrenging, som betyr at det er designet for å kunne brukes i alle hverdagslige situasjoner.

Vann- og støvavvisende betyr at du ikke trenger å bekymre deg for at høreapparatet blir vått når det regner, eller hvis det kommer i kontakt med svette.

Sørg for å tørke av fuktighet før du lader høreapparatet.

Hvis høreapparatet kommer i kontakt med vann og slutter å virke, tørk bort vannet og la høreapparatet tørke.

VIKTIG MERKNAD

Ikke bruk høreapparatet når du dusjer eller deltar i aktiviteter med vann.
Ikke senk høreapparatet ned i vann eller andre væsker.

Bruksforhold

(MNR T R)

Driftsforhold	Temperatur: +5 °C til +40 °C Fuktighet: 5% til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
Ladeforhold	Temperatur: +5 °C til +40 °C Fuktighet: 5% til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
Transport og oppbevaringsforhold	Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor i lengre perioder under transport og lagring: Transport: Temperatur: -20 °C til +60 °C Fuktighet: 5% til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa Oppbevaring: Temperatur: -20 °C til +30 °C Fuktighet: 5% til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

Merk

For mer informasjon om laderens vilkår for bruk, se laderens bruksanvisning.

Bruksforhold

(MNR T)

Driftsforhold	Temperatur: +1 °C til +40 °C Fuktighet: 5% til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
Transport og oppbevaringsforhold	Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor i lengre perioder under transport og lagring: Transport: Temperatur: -25 °C til +60 °C Fuktighet: 5 % til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa Oppbevaring: Temperatur: -25 °C til +60 °C Fuktighet: 5% til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

Teknisk informasjon

Høreapparatet inneholder følgende to radioteknologier:

Høreapparat inneholder en radiotransceiver som benytter en magnetisk induksjonsteknologi med kort rekkevidde som virker på 3,84 MHz. Styrken på senderens magnetiske felt er veldig svakt, og er alltid under 15 nW (typisk under $-40 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ ($-12,20 \text{ dB}\mu\text{A/ft}$) på 10 meters (33 fots) avstand).

Høreapparatet inneholder også en radiotransceiver som bruker Bluetooth lav-energi teknologi, og en patentbeskyttet radioteknologi for kort rekkevidde som begge virker på ISM-bånd 2,4 GHz.

(MNR T R)

Radiosenderen er svak og er alltid under 9 mW, tilsvarende 9,6 dBm i total utstrålt effekt.

(MNR T)

Radiosenderen er svak og er alltid under 9 mW, tilsvarende 9,6 dBm i total utstrålt effekt.

Høreapparatet samsvarer med internasjonale standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering mot mennesker. Bruk kun høreapparatet ditt i områdene hvor trådløs sending er tillatt.

På grunn av begrenset størrelse på høreapparatet, er alle relevante godkjenningsmerker å finne i dette heftet. Detaljert informasjon finner du i Produktinformasjonsark på www.bernafon.com

USA og Canada

(MNR T R)

Dette apparatet inneholder en radiomodul (DA AU5 MNR R) med følgende sertifiserings ID-numre:
FCC ID: 2ACAHAU5MRTRC
IC: 11936A-AU5MRTRC

USA og Canada

(MNR T)

Dette apparatet inneholder en radiomodul (MI AU5 MNR T) med følgende sertifiserings ID-numre:
FCC ID: 2ACAHAU5MNRT
IC: 11936A-AU5MNRT

Merk:

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC regelverket og med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSSs standarder. Bruken av apparatet er underlagt følgende to vilkår: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Herved erklærer produsenten at dette høreapparatet er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser ifølge direktiv 2014/53/EU.

Dette medisinske utstyret er i samsvar med Medical Device Regulation (EF) 2017/745.

Samsvarserklæring er tilgjengelig fra hovedkontoret.

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
www.bernafon.com/doc

CE 0123



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.



 **Bluetooth®**

IP68

Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet



Advarsler

Tekst markert med et advarselssymbol må leses før enheten benyttes.



Produsent

Enheden er produsert av en produsent med navn og adresse oppgitt ved siden av symbolet. Angir den medisinske enhetens produsent, som definert i EU-direktiv 2017/745.



EU-merke

Enheden oppfyller alle nødvendige EU-forskrifter og -direktiv. Det firesifrede tallet indikerer identifikasjonen til kontrollorganet.



Elektronisk avfall (WEEE)

Resirkuler høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale reguleringer. Brukere av høreapparater kan også returnere elektronisk avfall til sin audiograf for avhending. Elektronisk utstyr dekkes av Direktivet 2012/19/EU om avfall og elektronisk utstyr (WEEE).



Merke for regulatorisk overholdelse (RCM)

Enheden samsvarer med elektrisk sikkerhet, EMC og radiospektrumkrav for enheter levert til Australia eller New Zealand.

IP68

IP-kode

Indikerer beskyttelsesklassen mot skadelig vanninntrengning og partikkelformet materiale ifølge EN 60529. IP6X indikerer fullstendig støvbeskyttelse. IPX8 indikerer beskyttelse mot effekten av å være løpende nedsenket i vann.



Bluetooth-logo

Registrert varemerke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. All bruk krever lisens.

Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet



Made for Apple-merker

Indikerer at enheten er kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.



Android-merke

Indikerer at enheten er kompatibel med Android.



Teleslynge

Denne logoen har innarbeidet det universale symbolet for hørselshjelp. «T»-en angir et tilgjengelig teleslynge-kompatibelt system.



Radiofrekvens (RF) sender

Høreapparatet inneholder en RF-sender.

GTIN

Global Trade Item Number

Et globalt unikt 14-sifret nummer brukt til å identifisere medisinsk utstørsprodukter, inkludert medisinsk enhet programvare. GTIN i dette heftet er knyttet til medisinsk enhet firmware (FW). GTIN på forskriftsmessig emballasjemerke er knyttet til medisinsk enhet programvare.

Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene



Holdes tørr

Indikerer en medisinsk enhet som må beskytte mot fuktighet.



Advarselssymbol

Konsulter bruksanvisningen for advarsler og forsiktighetsregler.



Katalognummer

Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.



Serienummer

Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.



Medisinsk utstyr

Denne enheten er et medisinsk utstyr.



Symbol for gjenvinning av batteri

Symbol for gjenvinning av Li-Ion-batteri.



Temperaturgrense

Angir temperaturgrensene som det medisinske utstyret kan trygt utsettes for.



Fuktighetsbegrensning

Angir det fuktighetsområdet som det medisinske utstyret kan trygt utsettes for.



Radiofrekvens identifikasjon

Indikerer tilstedeværelsen av et passivt identifikasjonsmerke for radiofrekvens innlemmet i enheten for produksjons- og serviceformål.

Internasjonal garanti

Enheten din dekkes av en internasjonal garanti utstedt av produsenten. Denne internasjonale garantien dekker produksjons- og materialfeil i selve enheten, men ikke i tilbehør slik som batterier, slanger, lydgivere, ørepropper og filtre osv. Den internasjonale garantien dekker IKKE feil som oppstår grunnet feil- eller ukorrekt håndtering eller vedlikehold, overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt av uautorisert personell, fysiske endringer i øret ditt, at det blir utsatt for etsende væske, skade forårsaket av fremmedlegeme i apparatet eller feiljusteringer, da dette kan ugyldiggjøre garantien. Den internasjonale garantien ovenfor påvirker ingen rettigheter du har gjennom gjeldende nasjonale lovgivninger angående forbrukerkjøp i landet hvor du kjøpte enheten din.

Audiografen din kan også ha innført en garanti som går utover denne internasjonale garantien. Ta kontakt med Bernafon AG for mer informasjon.

Hvis du trenger hjelp

Ta med enheten din til audiografen din, som kan være i stand til å løse små problemer og justeringer på stedet. Audiografen din kan kreve et gebyr for deres tjenester.

Garanti

Sertifikat

Navn på eier: _____

Audiograf: _____

Audiografens adresse: _____

Audiografens telefonnummer: _____

Kjøpsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____

Modell venstre: _____ Serienr.: _____

Modell høyre: _____ Serienr.: _____

Dine individuelle høreapparatinnstillinger

Fylles ut av audiografen.

Tinnitus SoundSupport: Begrensninger for bruk			
☐	Ingen begrensninger på bruk		
	Program	Oppstartvolum (Tinnitus)	Maksimalt volum (Tinnitus)
☐	1	Maks _____ timer per dag	Maks _____ timer per dag
☐	2	Maks _____ timer per dag	Maks _____ timer per dag
☐	3	Maks _____ timer per dag	Maks _____ timer per dag
☐	4	Maks _____ timer per dag	Maks _____ timer per dag

Oversikt over høreapparatinnstillingene i Tinnitus SoundSupport

Venstre

Høyre

☐ Ja☐ Nei

Tinnitus SoundSupport

☐ Ja☐ Nei

☐ **A) Slik endres Tinnitus SoundSupport volum i begge ørene hver for seg**
For å **øke** eller **senke** volumet (på kun ett høreapparat), bruk et kort trykk på øvre del av trykknappen gjentatte ganger til du når ønsket nivå.

☐ **B) Slik endrer man Tinnitus SoundSupport volum i begge ørene samtidig**
Du kan bruke ett høreapparat til å øke/ redusere lyden i begge høreapparatene. Når du endrer volumet i ett høreapparat, endres også volumet i det andre høreapparatet.
For å **øke** volumet, bruk et kort trykk på den øverste delen av trykknappen gjentatte ganger.
For å **redusere** volumet, bruk et kort trykk på den nederste delen av trykknappen gjentatte ganger.

Fylles ut av audiografen.

Oversikt over de generelle høreapparatinnstillingene

Venstre			Høyre	
☐ Ja	☐ Nei	Endre volum	☐ Ja	☐ Nei
☐ Ja	☐ Nei		☐ Ja	☐ Nei
☐ Kort trykk		Bytte program	☐ Kort trykk	
☐ Langt trykk			☐ Langt trykk	
Volumkontrollindikator				
☐ PÅ	☐ AV	Piper ved min/maks volum	☐ PÅ	☐ AV
☐ PÅ	☐ AV	Piper ved volumendring	☐ PÅ	☐ AV
☐ PÅ	☐ AV	Piper ved oppstartsvolum	☐ PÅ	☐ AV
Batteriindikatorer				
☐ PÅ	☐ AV	Advarsel ved lavt batteri	☐ PÅ	☐ AV

Fylles ut av audiografen.

Lyd- og LED-indikatorer

Forskjellige mønstre for lyd og lys indikerer høreapparatets status. De forskjellige indikatorene er oppgitt på følgende sider. For lysindikatorer på laderen din, se laderens bruksanvisning.

Din audiograf kan stille lyd- og LED-lysindikatorene til å samsvare med preferansene dine.

Program	☐ Lyd	☐ LED-lys*	Når skal den brukes
1	1 tone		
2	2 toner		
3	3 toner		
4	4 toner		

 Kort GRØNT blink

* LED-lyset blinker kontinuerlig eller gjentas tre ganger med korte pauser

Fortsetter på neste side

AV/PÅ	Lyd	LED-lys	LED-lyskommentarer
PÅ	☐ Lydsnutt	☐  	Vist én gang
AV (MNR T R)	☐ 4 synkende toner	☐ 	
Volum	Lyd	LED-lys	
Oppstartsvolum	☐ 2 pip	☐ 	
Minimum/maksimum volum	☐ 3 pip	☐ 	
Volum opp/ned	☐ 1 pip	☐ 	Kontinuerlig eller gjentatt tre ganger
Mute		☐  	

 Langt GRØNT blink
  Kort GRØNT blink
  Langt ORANSJE blink
  Kort ORANSJE blink

Tilbehør	☐ Lyd	☐ LED-lys	LED-lyskommentarer
TV-A	2 forskjellige toner	 	Kontinuerlig eller gjentatt tre ganger
SoundClip-A	2 forskjellige toner	 	
Flymodus	☐ Lyd	☐ LED-lys	
Flymodus aktivert (MNR T R)	4 synkende toner + kort lydsnutt	   	
Flymodus deaktivert (MNR T R)	4 synkende toner + kort lydsnutt	   *	
Flymodus aktivert (MNR T)	Kort lydsnutt	  	
Flymodus deaktivert (MNR T)	Kort lydsnutt	  *	


 Langt GRØNT blink
  Kort GRØNT blink
  Langt ORANSJE blink
  Kort ORANSJE blink

*Kun tilgjengelig når tre-gangs repetisjon er valgt

Fortsetter på neste side

Advarsler	Lyd	LED-lys	LED-lyskommentarer
Lavt batterinivå	☐ Tre vekslende pip	☐ ● ● ● ● ● ● ● ●	Blinker kontinuerlig
Batteri stenger ned	4 synkende toner		
Mikrofon-servicekontroll nødvendig	Åtte pip gjentas fire ganger	☐ ■ ■ ■ ■	Repetert fire ganger
Høreapparatets LED-lys slår seg ikke PÅ når høreapparatet er plassert i laderen (MNR T R)		Slått AV	Se delen Feilsøking

234992 / NO

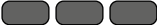Advarsler	Lyd	LED-lys	LED-lyskommentarer
Høreapparatets LED-lys blinker ORANSJE når høreapparatet er plassert i laderen (MNR T R)			Blinker kontinuerlig. Se delen Feilsøking .
Høreapparatets LED-lys blinker GRØNT når høreapparatet er plassert i laderen (MNR T R)			Blinker kontinuerlig. Se delen Feilsøking .

 Langt GRØNT blink
  Kort GRØNT blink
  Langt ORANSJE blink
  Kort ORANSJE blink



0000234992000001

bernafon 
Your hearing • Our passion

2021-06-29 / 234992 / NO / subject to change