

# RC-P

Fjernkontroll

# BRUKSANVISNING

**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing • Our passion



# INNHOILDSFORTEGNELSE

## Bernafon RC-P fjernkontroll

Beskrivelse .....	7
Batteribytte .....	8
Betjening med fjernkontroll .....	11
Avstand .....	12
Lås .....	13
Volumkontroll .....	14
Programvelger .....	15
Muteknapp .....	16



Statuslys .....	17
Feste for halssnor .....	19
Rengjøring .....	20
Beskyttelse av miljøet .....	21
Sikkerhetsforskrifter .....	22
Internasjonal garanti .....	25
Samsvarserklæring .....	26


# Introduksjon



Fjernkontroll (RC- P)

Denne bruksanvisningen beskriver hvordan du kan få mest mulig nytte av din nye Bernafon fjernkontroll. Vennligst følg instruksjonene for vedlikehold og bruk.

# Beskrivelse

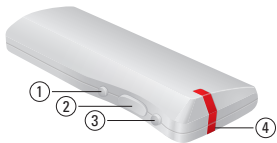

- 1 Programvelger
- 2 Volumkontroll
- 3 Muteknapp
- 4 Statuslys





- 5 Feste for halssnor
- 6 Batterilokk
- 7 Lås

# Batteribytte

Fjernkontrollen bruker batteritype CR2.

For å sette inn nytt batteri:

- Fjern batterilokket forsiktig. (A)
- Kontroller at "+" tegnet på batteriet og "+" tegnet i batteriskuffen peker i samme retning.

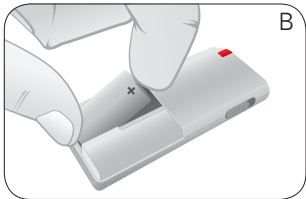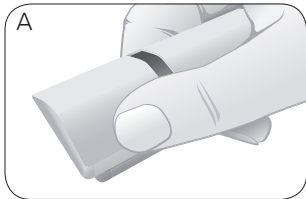



- Plasser batteriet i batteriskuffen og pass på at batteriet har kontakt i begge ender. (B)
- Sett på batterilokket.

Merk:

- Hvis batteriet er satt inn riktig, skal det ikke være nødvendig å bruke makt for å lukke batterilokket.
- Batterilevetiden varierer avhengig av bruken.  
Kontakt din audiograf for mer informasjon.

## Betjening med fjernkontroll

Høreapparatene dine kan betjenes med knappene på fjernkontrollen. Dersom du har høreapparat på begge ørene, vil fjernkontrollen justere begge samtidig.


# Avstand

Med fjernkontrollen kan du betjene høreapparatene dine innenfor en rekkevidde på 1 meter. Det er ikke nødvendig med direkte sikt mellom fjernkontrollen og høreapparatene.


# Lås

Fjernkontrollen din er utstyrt med en lås for å unngå uønsket justering.

- Skyv låsen slik at den grønne prikken er synlig:  
Fjernkontrollen er klar for bruk. (A)
- Skyv låsen slik at den grønne prikken ikke er synlig:  
Fjernkontrollens funksjoner er deaktivert. (B)

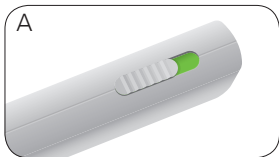


Grønn prikk er synlig: Klar til bruk

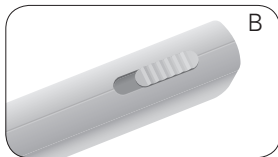

Grønn prikk er skjult: Deaktivert

# Volumkontroll

Styrken i høreapparatene dine kan justeres via volumkontrollen.

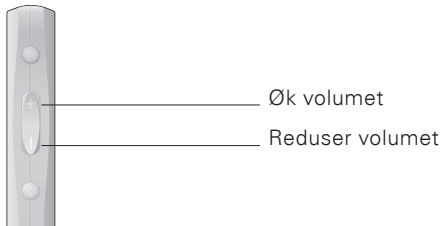

Trykk på "+" for å øke volumet (sterkere)

Trykk på "-" for å redusere volumet (svakere)

# Programvelger

For å endre program i høreapparatet med fjernkontrollen, trykk på "●" knappen. Hvert trykk gjør at høreapparatet skifter til neste program.



Programvelger

# Muteknapp

Fjernkontrollen er utstyrt med en muteknapp. Ved å trykke på denne går høreapparatene i muteposisjon.




Muteknapp

Trykk på “\*” knappen for å få tilgang til mute-funksjonen. Ved å trykke på hvilken som helst knapp på fjernkontrollen deaktiveres mute-funksjonen på høreapparatene.




# Statuslys

Statuslyset på fjernkontrollen indikerer at fjernkontrollen er operativ. Det vil blinke etter hvert trykk. To ulike lys kan sees.


 blinking indikerer at fjernkontrollen er låst. For å låse opp, skyves låsen slik at den grønne prikken blir synlig.

**Grønt** blink indikerer at fjernkontrollen er aktiv og at kommandoen er sendt til høreapparatene.

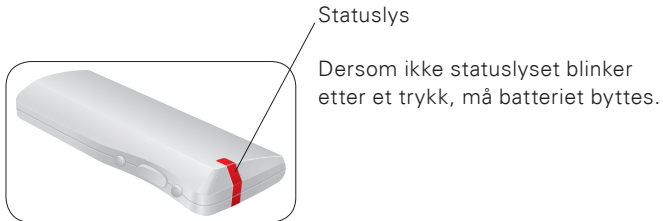

## Feste for halssnor

Det er mulig å feste fjernkontrollen til en halssnor. Dra ut ringen som finnes nær batteriluken og tre snoren igjennom.

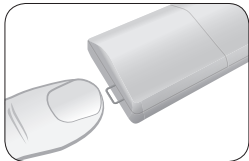

## Rengjøring

- Hold fjernkontrollen over et bord når du bytter batteri eller rengjør fjernkontrollen. Da unngår du at den blir ødelagt hvis du mister den.
- Rengjør fjernkontrollen jevnlig med en tørr klut.
- Unngå at fjernkontrollen blir utsatt for fuktighet.
- Tørk aldri fjernkontrollen med hårføner, i en mikrobølgeovn e.l.
- Fjernkontrollen må aldri utsettes for sterk varme.

## Beskyttelse av miljøet



Tenk på miljøet, ikke kast batteriene eller fjernkontrollen sammen med husholdningsavfallet. Det vil føre til miljøforurensning. Vennligst resirkuler fjernkontrollen og batteriene, eller returner dem til hørselssentralen din. Kontakt din audiograf for mer informasjon.

## Sikkerhetsforskrifter

- Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen før du tar den nye fjernkontrollen i bruk.
- Fjernkontrollen skal ikke brukes om bord i fly.
- Et oppbrukt batteri bør fjernes/erstattes øyeblikkelig.
- Brukte batterier bør returneres til din forhandler eller audiograf.
- Brenn aldri batterier, det kan medføre eksplosjonsfare.
- Kast ikke batterier sammen med husholdningsavfall. Det kan føre til miljøforurensning.

- Prøv aldri å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Kontakt øyeblikkelig kvalifisert helsepersonell hvis batterier svelges!
- Fjernkontrollen er ikke godkjent for bruk der det er eksplosjonsfare og må ikke benyttes i slike omgivelser.
- Fjernkontrollen benytter digitalt induktive signaler for å overføre kommandoer til høreapparatene. Selv om det er lite sannsynlig, råder det en viss bekymring for at disse signalene kan påvirke medisinsk utstyr som f.eks. pacemakere.

- For sikkerhets skyld anbefaler vi derfor at pacemakerpasienter ikke har fjernkontrollen i brystlommen eller rundt halsen.
- Advarsel! Fjernkontrollen er ikke en leke og skal ikke under noen omstendigheter overlates til små barn.
- Av sikkerhetsmessige grunner skal aldri snorene knyttes sammen. Benytt snorlåsen som følger med.



## Internasjonal garanti

Garantien på Bernafons fjernkontroller dekker material- og produksjonsfeil i en periode på 12 mndr fra utleveringsdato. Garantien dekker fjernkontrollen, men ikke tilbehør som batterier o.l. og gjelder ikke dersom feilen er oppstått pga misbruk eller feilaktig bruk.

Denne garantien er ugyldig dersom fjernkontrollen er blitt reparert av uautorisert personell.

# Samsvarserklæring

Bernafon AG erklærer herved at RC-P fjernkontroll er i overensstemmelse med grunnleggende krav og relevante bestemmelser i hht til Direktiv 1999/5/EC og Direktiv 93/42/EEC. En kopi av samsvarserklæringen kan fås ved henvendelse til følgende adresse:

## **Bernafon AG**

Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Switzerland

RC-P fjernkontroll er godkjent for bruk i følgende land:  
Alle medlemmer av EU, EFTA, AU, CA, JP, NZ og US.

 FCC ID: U6XRCP  
IC: 7031A-RCP

 N14144

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device emits according to following standard:  
ETSI EN 300 330 – 1 V1.5.1

# Notater

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# Notater

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





## Manufacturer

### Switzerland

Bernafon AG

Morgenstrasse 131

3018 Bern

Phone +41 31 998 15 15

Fax +41 31 998 15 90

[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)



**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing • Our passion