




TCL 400

Bruksanvisning (NO)

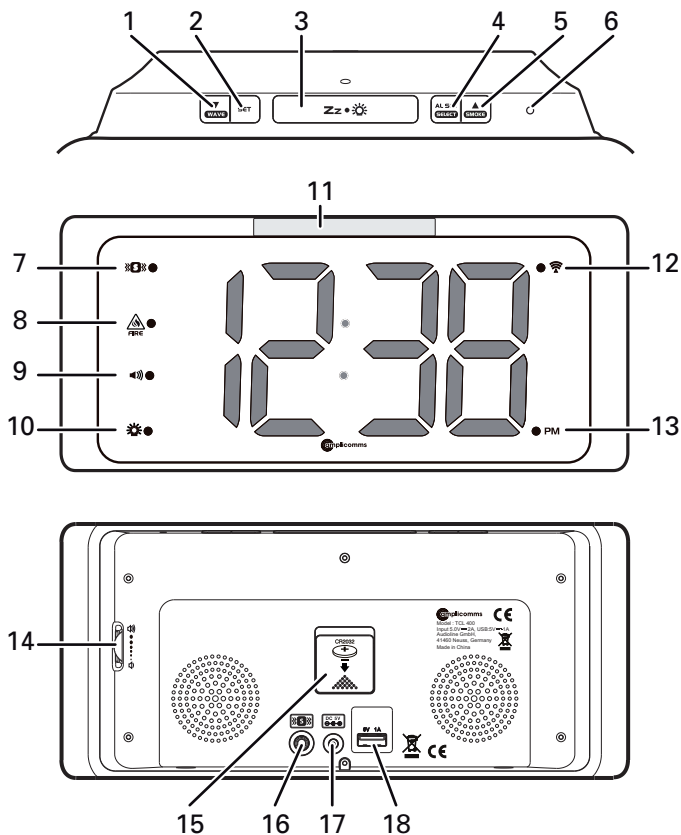

- 1 WAVE/▼-knapp
- 2 SET-knapp
- 3 Slumre-/dimme-knapp
- 4 AL SET/SELECT-knapp
- 5 SMOKE/▲-knapp
- 6 Mikrofon
- 7 LED „Vibrasjonsalarm på“
- 8 LED „Røykvarsler-mottak på“
- 9 LED „Alarmklokke-lyd på“
- 10 LED „Alarmklokke-blitzlys på“
- 11 Alarmklokke-blitzlys
- 12 LED „Automatisk tidsinnstilling aktiv“
- 13 LED „PM“
- 14 Innstilling vekkelyd-volum
- 15 Batterirom (for reservebatteri)
- 16 Tilkobling for vibrasjonspute
- 17 Tilkobling for strømforsyning
- 18 USB-utgang for lading av mobiltelefon osv.

Pakkens innhold

- Alarmklokke
- Strømadapter 5 V, 2 A
- Bruksanvisning

Koble til alarmklokke

Forsiktig: Bruk bare den medfølgende strømadapteren da andre strømforsyninger kan skade enheten. Tilgangen til strømadapteren må ikke blokkeres av møbler eller andre gjenstander. Stikkontakten skal være installert nær utstyret og være lett tilgjengelig.

Reservebatteri

Reservebatteriet, (CR2032 litium-batteri), brukes ved kortere strømbrydd eller når strømadapteren er trukket ut. Slik beholdes innstillingene for tid og alarm. Under et strømbrydd vises ikke tiden og alarmklokken fungerer ikke.

Hvis batteri ikke er satt inn, går tids- og alarminnstillingene tapt under et strømbrydd. Hvis strømbryddet skjer om natten, vil dette bety at du ikke vekkes til ønsket tid om morgenen.

For å være på den sikre siden, bør batteriet skiftes etter ca. ett år. Batterier som lekker, kan skade enheten.

Når batteriet skal skiftes, legges enheten på et flatt underlag med baksiden opp. Ta av dekselet på batterirommet og legg inn et litiumbatteri, CR2032, med +- polen pekende oppover. Sett på igjen dekselet til batterirommet.

FORSIKTIG: fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type.

Miljøavhengig mottakskvalitet

Radio-alarmklokken mottar nøyaktig tid via et radiosignal. Som med alle radiobaserte enheter kan mottaket påvirkes av følgende ting:

- Stor avstand til senderen
- Fjell og daler i nærheten
- I høyhus
- I nærheten av jernbane, høyspentkabler osv.
- I nærheten av motorvei, flyplass osv.
- I nærheten av byggeplass
- Inne i betongbygning
- I nærheten av elektrisk utstyr
- I nærheten av datamaskiner og TV
- Inne i kjøretøy som er under bevegelse.

Plasser alarmklokken på et sted med optimalt signal, dvs. i nærheten av et vindu og lengst mulig unna metalloverflater og elektriske enheter.

Mottak av tidssignalet

Etter aktivering av alarmklokken, begynner den å motta radiosignalet med dimmede sifre (lav lysstyrke). LED  blinker.

- Signal blir mottatt (LED  blinker)
- Mottatt (LED  lyser vedvarende)
- Feil ved mottaket (LED  slukker).

Mottaksmodus og signalstyrke

Trykk på **WAVE/▼**-knappen én gang under mottaket for å vise mottaksstyrken og signalstyrken:

- Hvis et sterkt signal fanges opp, viser skjermen 3 stolper
.
- Hvis et svakt eller ingen signaler fanges opp, viser skjermen
 eller .
- Under mottaket kan signalstyrken endre seg fra 1 til 2-3 stolper. Dette er normalt da mottakeren registrerer både tidssignalet og andre signaler samtidig.
- Trykk på **WAVE/▼**-knappen én gang for å gå tilbake til visning av tiden mens LED  blinker.

Automatisk og manuelt mottak

Automatisk mottak

Alarmklokken starter automatisk mottak hver dag klokken 01:00, 02:00 og 03:00. Hvis tidssignalet ikke er mottatt før klokken 03:00, begynner mottaket klokken 04:00. Hvis det mislykkes igjen, starter mottaket for siste gang klokken 05:00. Hvis dette også mislykkes, starter det automatiske mottaket neste dag klokken 01:00.

Manuelt mottak

Trykk og hold **WAVE/▼**-knappen, alarmklokken gir en kort signaltone og starter det manuelle mottaket. Trykk og hold **WAVE/▼**-knappen for å avslutte mottaket av radiosignalet. Når alarmklokken fanger opp tidssignalet, blir skjermen mørk. Etter mottaket av tidssignalet blir lysstyrken igjen justert til den som var innstilt før mottaket. Under mottaket fungerer ikke knappene.

Stille inn klokkeslett og pausevarighet

(Tysk versjon: Standardtid ved 0:00 og 24h-tidsformat)

(U.K. versjon: Standardtid ved 12:00 og 12h-tidsformat, ingen tidssone)

1. Trykk på **SET**-knappen, "00" blinker, trykk på ▲/▼ for å stille inn tidssonen (bare for tysk versjon).
 "00" = GMT +1 time (eks. Tyskland)
 "01" = GMT +2 timer (eks. Finland)
 "-01" = GMT 00 time (eks. U.K.)
2. Trykk igjen på **SET**-knappen, timetallene blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn timer (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).
3. Trykk igjen på **SET**-knappen, minutt skjermen "00" blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn minutter (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).
4. Trykk igjen på **SET**-knappen, på skjermen blinker tidsformaten. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge "12Hr" eller "24Hr". Når "12Hr" velges, lyser LED **PM** nederst til høyre for å vise ettermiddag. Det finnes ingen AM- skjerm.
5. Trykk igjen på **SET**-knappen, på skjermen blinker "05". Trykk på ▲ eller ▼ for å velge slumretid fra 5 til 60 minutter.
6. Trykk igjen på **SET**-knappen for å gå ut av innstillingsmodus. Når ingen knapp trykkes på i løpet av 10 sekunder, avsluttes innstillingsmodus automatisk.

Stille inn alarmtid

1. Trykk og hold **AL SET/SELECT**-knappen, LED «**3**» og timetall blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn alarmen i timer (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).
2. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen, minutt skjermen for alarmen blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn minutter (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).
3. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen, skjermen viser "**HI**" (høy vibrasjonsstyrke). Trykk på ▲ eller ▼ for å velge "**LO**" (svak vibrasjonsstyrke). **Merk:** Vibrasjonspute er ikke inkludert i leveringen.
4. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen, på skjermen blinker "**F-1**". Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn alarm-lyden.
 - F-1 (dypere lyd, 800 Hz)
 - F-2 (middels lyd, 1 kHz)
 - F-3 (høyere lyd, 1,5 kHz)
5. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen for å gå ut av innstillingsmodus. Når ingen knapp trykkes på i løpet av 10 sekunder, avsluttes innstillingsmodus automatisk.

Stille inn alarmmodus

1. Trykk på **AL SET/SELECT**-knappen i normaltids-skjermmodus for å stille inn alarmmodus. Tilsvarende skjerm-LED på venstre sider av skjermen lyser opp:
»«: Bare vibrasjon
»»«: Lyd og vibrasjon
»»«: Blitzlys og vibrasjon
»»»«: Blitzlys, lyd og vibrasjon
Merk: Vibrasjonspute er ikke inkludert i leveringen.
2. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen for å slå av alle innstilte alarmer. Alle skjerm-LED »«, »« og »« er av.


Stille inn volum

Still inn volumet på alarmsignalet ved hjelp av volumknappen på høyre side av alarmklokken.

Røykvarsler-registrering

1. Hold **SMOKE/▲**-knappen trykket ned, LED  er slått på og røykvarsler-registrering er aktivert. Når mikrofonen på alarmklokken fanger opp en alarmlyd fra en røykvarsler, blinker LED  og alarmklokken alarmerer ved hjelp av:
 - Blinkende skjerm "AL"
 - Alarmlyd (avhengig av alarmens volum)
 - Blitzlys
 - Vibrasjon (vibrasjonspute er ikke inkludert i leveringen).
2. For å stoppe alarmen, trykk på **SMOKE/▲**-knappen. LED  lyser fremdeles.

Merk: Røykvarsler-registrering er begrenset til 2,5 til 3 meter fra røykvarsleren. Røykvarsling over større avstander eller hele rommet er ikke mulig.

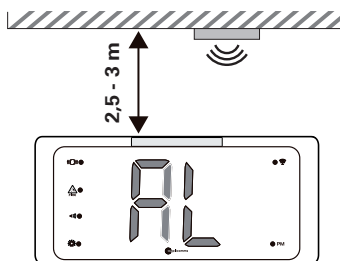

Sjekk fra tid til annen om det finnes smuss i åpningen på mikrofonen. Rengjør åpningen om nødvendig med en myk børste.



Sjekk røykvarslerens registrering

For sjekk av røykvarslerens registrering: Trykk på "Test"- knappen på røykvarsleren og sjekk om din TCL 400 er innenfor rekkevidde. Når TCL 400 oppdager røykvarsler-alarmen, varsler den gjennom:

- Blinkende skjerm "AL"
- Alarmtone (avhengig av volum)
- Blitzlys
- Vibrasjon (vibrasjonspute er ikke inkludert i leveringen).


Bekreft alarmen

Når alarmen er gitt, blinker den tilsvarende alarmmodus-skjermen.

Trykk én gang på **AL SET/SELECT**- knappen, for å stoppe alarmen og tilbakestille den til neste dag. Den tilsvarende alarmmodus-skjermen består.

Bruke slumre-funksjon

Når alarmsignalet er utløst, trykk på **Slumre-/dimme**-knappen

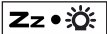. Alarmsignalet slås av midlertidig, mens det tilsvarende alarmmodus-signalet blinker videre. Alarmsignalet slås på igjen etter at den innstilte slumretiden er over.

Innstilling av skjermens lysstyrke

Skjermens lysstyrke kan innstilles i tre trinn. Trykk på **Slumre-/dimme**-knappen , for å stille inn lysstyrken (HI/MED/LO) på skjermen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens enheten sender ut en alarm.

Lade mobiltelefonen via USB-port

Koble ladekabelen (følger ikke med i leveringen) på den mobile enheten til USB-porten (type A) på baksiden av enheten og koble den andre enden til den mobile enheten.

Merk

- Bruk bare den originale kabelen til mobilenheten til lading.
- Bruk bare strømadapteren (5V/2A) som følger med enheten til strømforsyning av alarmklokken. Andre strømforsyninger kan ikke lade den mobile enheten.
- Lading av iPad og Notepad er ikke mulig
- Mens tidssignalet mottas og mens alarmsignalet gis, utføres det ingen USB-lading.

Tekniske data / funksjoner

Funksjoner: Klokke, alarm

Alarmmodus: Alarmtone, vibrasjon, blitzlys

Strømforsyning:

Strømforsynings-inngang 100~240 V AC, utgang 5V DC / 2A.

Reservebatteri (valgfritt, ikke inkludert i leveringen):

CR2032 litium-batteri, skiftes ut årlig.

Spesifikasjoner

Alarmvarighet	1 time
Slumrevarighet	5 til 60 minutter
Grunninnstillinger:	
Tidsformat	24 timer (tysk versjon), 12 timer (britisk versjon)
Tid	0:00 (tysk versjon), 12:00 (britisk versjon)
Alarm	6:00 (AM)
Alarm-lydstyrke og	
Vibrasjonsstyrke	HI
Alarmtone	F-1
Røykvarsleralarm	AV
Slumrevarighet	05 (5 minutter)

Sikkerhetsmerknader

- Les denne bruksanvisningen nøye og oppbevar den til senere bruk.
- Bruk aldri elektriske enheter i nærheten av vann, f.eks. badevann, servanter, bassenger, vasker, i fuktige kjellere eller lignende steder.
- Plasser enheten på et stabilt underlag og beskytt den mot direkte sollys og overflødig hete og fuktighet.
- La det være god plass rundt enheten. Sjekk om luften sirkulerer fritt rundt enheten.
- Sørg for at ventileringsåpningene på enheten ikke blokkeres. Plasser ikke enheten på senger, sofa, tepper eller lignende underlag da ventileringsåpningene lett kan blokkeres. Plasser ikke enheten i låste rom som f.eks. hyller og skap. Fjern alle gjenstander, som f.eks. duker, gardiner, forheng og aviser som kan blokkere ventileringsåpningene.
- Beskytt enheten mot dråper og vannsprut. Plasser ikke fylte beholdere som f.eks. vaser, på eller i nærheten av enheten. Beholdere kan velte og væsken kan forringe el-sikkerheten.
- Bruk ikke enheten eller strømadapteren ute eller i rom med høy luftfuktighet.
- Koble enheten bare til en forskriftsmessig installert kontakt med spenning tilsvarende den som er oppgitt på strømadapteren.

- Trekk strømadapteren ut av kontakten:
 - under tordenvær
 - før den tilkoblede enheten rengjøres
 - når det oppstår forstyrrelser under bruken
 - når enheten ikke skal brukes over lengre tid.Trekk alltid i strømadapteren, ikke i kablen.
- Huset må ikke åpnes eller deler fjernes. Inne i huset er det strømførende deler som ved berøring kan gi elektrisk støt.
- Ingen gjenstander må stikkes inn i enhetens åpninger. De kan komme i berøring med strømførende deler.
- Tilkoblingskabelen må ikke bøyes eller klemmes. Hold tilkoblingskabelen vekk fra varme flater og skarpe kanter.
- Sjekk enheten og strømadapteren regelmessig for skader. Bruk ikke enheten hvis en av komponentene, strømadapteren eller tilkoblingskabelen er skadet, eller hvis enheten har falt ned.
- Beskytt møbelet hvis enheten legges på en malt treoverflate. For å unngå merker fra gummiføttene, legg eventuelt et sklisikkert underlag mellom enheten og møbelet.

Avhending

Du er pålagt ved lov å sørge for sikker avhending av forbruksvarer. Symbolet vist nedenfor som finnes på enheten din, betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier må avhendes separat fra husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk utstyr skal avhendes på en tilordnet avfalls plass. Batterier avhendes på butikker som selger batterier og ved relevante innsamlingspunkter hvor tilsvarende container er stilt til disposisjon.

Emballasjemateriell skal avhendes i henhold til lokale forskrifter.



Vedlikehold

- Rengjør enheten med en myk klut som bare er fuktet med mild såpe og vann. Enhetens overflate kan ta skade av sterkere midler som for eksempel bensin, eller sterke rengjøringsmidler. Før rengjøringen må det sikres at enheten er frakoblet strømforsyningen.
- Hvis enheten ikke skal brukes over et lengre tidsrom, som for eksempel en måned, ta ut batteriet for å unngå mulig lekkasje. Hvis batterirommet er rustent eller skittent, rengjør rommet grundig og skift ut batteriet.
- Bruk fra tid til annen en børste med myk, ren og tørr bust for forsiktig fjerning av smuss fra mikrofonen.

Feilsøking

Hvis alarmklokken ikke fungerer som den skal eller viser feil tid, kan dette skyldes statisk elektrisitet eller andre forstyrrelser. Trekk ut strømadapteren fra stikkontakten og ta batteriet ut av alarmklokken. Vent noen minutter og sett deretter inn batteriet igjen og koble til strømadapteren. Alarmklokken tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og må innstilles på nytt.

Garanti

AMPLICOMMS - utstyr blir produsert og testet i henhold til de nyeste produksjonsmetoder. Utvalgte materialer og høyt utviklet teknologi sikrer problemfri drift og lang varighet. Garantitiden er 24 måneder fra kjøpedato. Garantien gjelder ikke for batterier eller batteripakninger.

Innenfor garantiperioden vil alle mangler som skyldes material- eller produksjonsfeil, repareres gratis. Garantien gjelder ikke hvis enheten er blitt forsøkt endret av kjøperen eller tredjeparter.

Skader som skyldes feil håndtering eller bruk, normal slitasje, feil plassering eller oppbevaring, feil tilkobling eller installasjon, så vel som naturkatastrofer eller andre ytre påvirkninger, dekkes ikke av garantien.

Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å reparere eller skifte ut defekte deler eller skifte ut enheten. Utskiftede deler og utskiftede enheter blir vår eiendom. Erstatningskrav er utelukket med mindre de er basert på forsettlig eller grov uaktsomhet fra produsentens side.

Hvis det utvikles en feil på enheten innenfor garantiperioden, kan du kontakte oss ved å sende kvitteringen utelukkende til butikken hvor AMPLICOMMS – enheten ble kjøpt. Alle garantikrav i henhold til disse bestemmelsene skal utelukkende rettes mot forhandleren. Etter et forløp på to år etter kjøp og overføring av våre produkter, er ikke garantien lenger gyldig.

Service-Hotline

Hvis du har tekniske problemer, vennligst kontakt vår hotline for kundeservice. Anropsnummeret finner du på hjemmesiden vår **www.amplicomms.com**

For garantikrav må du kontakte forhandleren. Garantitiden er 2 år.

Samsvarserklæring



Denne enheten oppfyller kravene i EU-direktivet: 1999/5/EF. Samsvar med ovennevnte direktiv er bekreftet av CE-merket på enheten.

For å se den fullstendige samsvarserklæringen, kan du laste den ned gratis fra vår hjemmeside **www.amplicomms.com**



Audioline GmbH
D-41460 Neuss

11/2016 – Ausgabe 1.1

